

## LATTICI di controllo

3 livelli per garantire:  
precisione, accuratezza,  
ripetibilità



### 6 TEST

SI 305.100-A  
(provette Greiner)

SI 305.102-A  
(provette Sarstedt)

### 30 TEST

SI 305.300-A  
(provette Greiner)

SI 305.302-A  
(provette Sarstedt)

## VEQ KIT

Kit di controllo di qualità  
esterno, specifico per gli  
analizzatori della famiglia Test 1



Disponibilità di diversi  
programmi di controllo di  
qualità esterno.

Per informazioni scrivete a  
[info@alifax.com](mailto:info@alifax.com)

## SMART CARD

L'uso della card  
contribuisce a rispettare  
l'ambiente: meno rifiuti,  
meno costi di trasporto e di  
stoccaggio



Card Disponibili  
(numero di test)

**1.000 • 4.000 • 10.000 • 20.000**



INSIDE INNOVATION

## NUOVA GENERAZIONE DI SISTEMI VES

SEMPRE AL PASSO CON L'INNOVAZIONE

tutte le pubblicazioni disponibili su [www.alifax.com](http://www.alifax.com)

### ALIFAX S.r.l.

Via F. Petrarca, 2/1 - 35020 Polverara - Padova - Italia  
Tel. (+39) 049 0992000 - Fax (+39) 049 5855434 | [info@alifax.com](mailto:info@alifax.com) | [www.alifax.com](http://www.alifax.com)  
Iscritta al Registro Imprese di Padova al n. 04337640280. Capitale sociale € 10.000.000 interamente  
versato. Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alifax Holding S.p.A.

ALI  
FAX

## TEST1 2.0

ANALIZZATORE AUTOMATICO DI  
NUOVA GENERAZIONE PER LA  
DETERMINAZIONE DELLA VES


La prima VES in <20"

# La VES in meno di 20 SECONDI

La tecnologia del TEST1 la Fotometria Capillare Quantitativa supera la maggior parte delle variabili e limitazioni dei metodi a sedimentazione (raccomandazioni ICSH, 2017)

- Temperatura stabilizzata a 37°C
- Nessuna diluizione del campione
- Utilizzo della provetta EDTA per emocromo
- Nuova unità di lettura standardizzata
- Miscelazione automatica
- Calibrazione e controllo con la tecnologia dei lattici
- Elevata riproducibilità
- Caricamento diretto dei rack dei contaglobuli senza manipolazione delle provette (carico- scarico)
- Eccellente correlazione con il metodo di riferimento

La tecnologia Alifax è classificata dalle linee guida CLSI come metodo alternativo per la VES (H02-A5 Vol. 31, N.11)

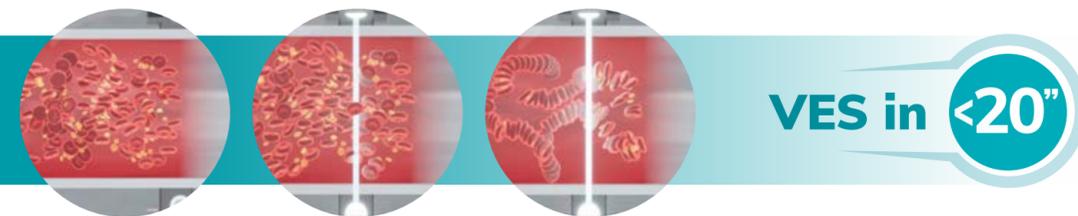

**VES in <20''**

“ I valori di VES ottenuti con Test 1 in pazienti con tumori maligni, patologie autoimmuni o infezioni, evidenziano meglio uno stato infiammatorio rispetto al metodo Westergren. *Clin Chem Lab Med* 2010; 48(7):1043–1048.

**YOUNG JOO CHA**  
MD, Depart. Of Lab Medicine, Chung-Ang University Hospital, Seoul, Korea.

## TEST1 2.0 SEMPRE AL PASSO CON L'INNOVAZIONE

- Solo 175 µl di campione analizzato
- Capacità fino a 120 campioni
- Fino a 195 campioni in 1 ora
- Caricamento continuo
- Caricamento delle provette senza allineamento dei barcode
- Minima manutenzione
- Connessione al TLA (Total Lab Automation)
- Accesso multi-livello conforme alle norme GDPR




FUNZIONE STAT ago esterno per campioni a basso volume e campioni urgenti



Miscelazione automatica per inversione completa delle provette



Sistema automatico di lavaggio

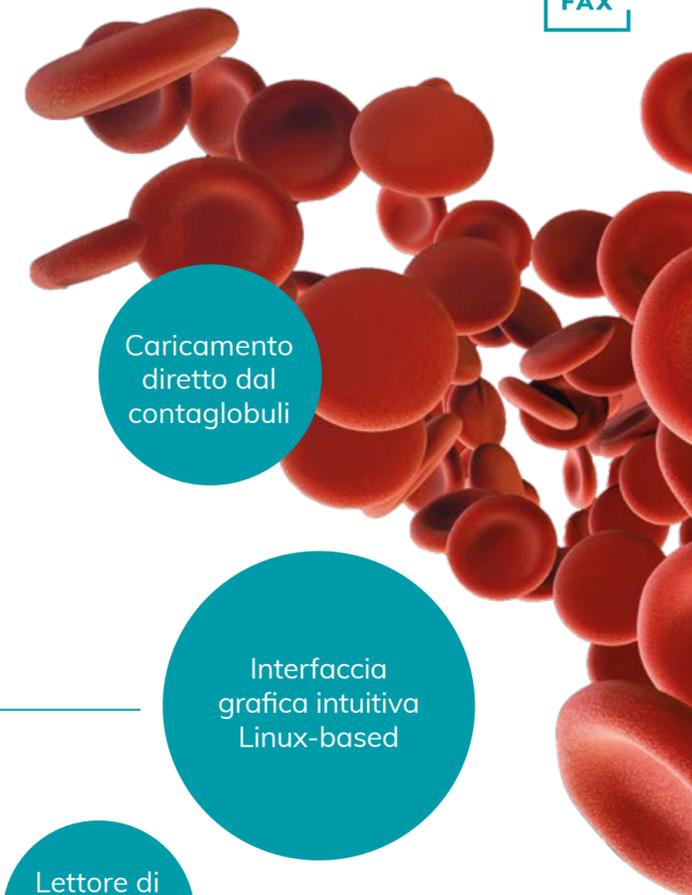

Caricamento diretto dal contaglobuli

Interfaccia grafica intuitiva Linux-based

Letto di codici a barra interno

AGO altamente performante

# TEST1 2.0

- 2 modelli disponibili:
- TEST1 2.0
  - TEST1 2.0 su TLA Sysmex®, modello CV-65

Log generator | Connessione bidirezionale al LIS | Memoria Interna | Prossima introduzione: accesso remoto

